

Uni Total Cholesterol

Alat Ukur Kadar Kolesterol & Strip



KEMENKES RI AKL 20101323614



10 Strip

25 Strip

KEMENKES RI AKL 20101814779

Sertifikasi



Penggunaan
Mudah



Aman
Digunakan



Hasil Cepat




500 Memori



Bergaransi

Spesifikasi	Uni Total Cholesterol Meter
Rentang Pengukuran	100~400 mg/dL
Sampel	Darah utuh kapiler
Volume Sampel	0,8 µl
Waktu Pengukuran	26 detik
Kapasitas Penyimpanan	500 memori

Cara Penggunaan

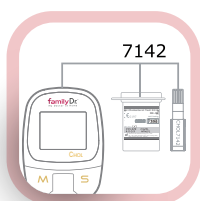

Lakukan coding alat saat pertama kali digunakan atau membuka strip baru.



Masukkan strip uji ke alat ukur dan pastikan kode sesuai dengan botol strip



Ambil darah dengan lancing device



Tempelkan darah sampel pada strip uji (bukan di tetes)



Hasil pengukuran akan muncul dalam beberapa detik.

Uni Uric Acid

Alat Ukur Kadar Asam Urat & Strip



KEMENKES RI AKL 20101323643



25 Strip

50 Strip

KEMENKES RI AKL 20101813526

Sertifikasi



Penggunaan
Mudah



Aman
Digunakan



Hasil Cepat




500 Memori




Bergaransi

Spesifikasi	Uni Uric Acid Meter
Rentang Pengukuran	3~20 mg/dL
Sampel	Darah utuh kapiler
Volume Sampel	1 µl
Waktu Pengukuran	15 detik
Kapasitas Penyimpanan	500 memori

Cara Penggunaan

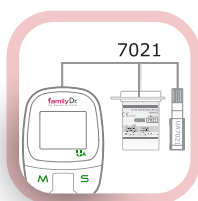

Lakukan coding alat saat pertama kali digunakan atau membuka strip baru.

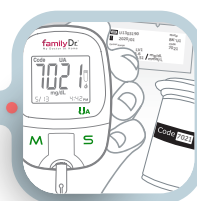


Masukkan strip uji ke alat ukur dan pastikan kode sesuai dengan botol strip



Ambil darah dengan lancing device



Tempelkan darah sampel pada strip uji (bukan di tetes)

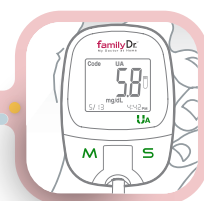

Hasil pengukuran akan muncul dalam beberapa detik.